

# TEAC

ネットワーク対応 HDD/SD 静止画・動画レコーダー

## MV Series

<http://teacmv.jp/>

**静止画像記録に加え  
最大10分間の動画記録に対応**

# MV-3CS



## 二重のバックアップ機能 ハードディスク／SDカード

内蔵ハードディスクとSDカードの両方に画像を記録できます。ハードディスクおよびSDカードに記録された画像は後で再度ネットワーク転送することも可能です。

※ 内蔵ハードディスクに記録した画像は古いものから順次上書きします。

※ SDカードは容量がいっぱいになると記録できません。

継続して記録するには交換もしくはフォーマットする必要があります。

### 使用するSDカードについて

※ 付属のSDカード以外を使用する場合は、SDスピードクラスが10以上のSDカードをお使いください。(SDスピードクラスが10未満のSDカードを使用すると、録画や再生が正常に行われない事があります。)

※ SDカードは新品を使用し、本機専用としてお使いください。

## ファイル転送

ネットワーク転送機能を標準装備、自動転送にも対応。また、ファイリング機能を持つ電子カルテとの連携ができます。

## NTSCビデオ信号に対応

MV-3CS : NTSC (RGB、S-Video、コンポジット)

## 内視鏡とのシャッター連動 (別途ケーブルが必要になります。)

術中の画像記録を正確にするため、内視鏡のシャッターと連動して記録します。

## 内視鏡または、他のモダリティーとの通信連動

RS-232Cを介して特定のモダリティーから制御することができます。


## 動画記録 — Motion JPEGによる動画記録に対応

ハードディスクを内蔵し、SD/SDHCカード記録に対応。動画は全て一旦ハードディスクに記録されます。ハードディスクに記録された動画は、ネットワーク転送によりサーバーに保管が可能です。また、SDメモリーカードにコピーが可能です。

## オプションソフトウェア

MV-3Cから取得した静止画・動画データを  
保存・管理する簡易画像ビューワ

画像メディアブラウザ **GT FINDER**

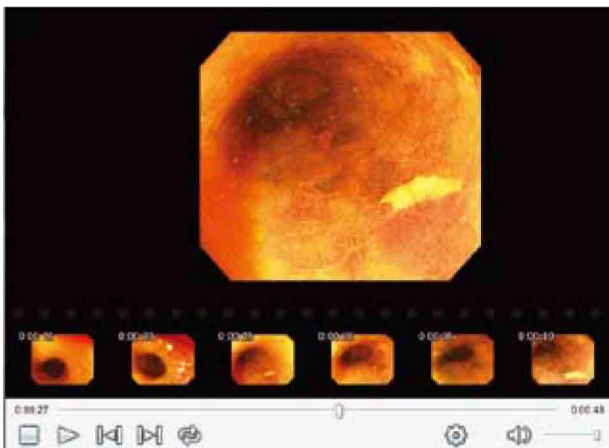


注意

※ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
※ 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

仕様					
記録	メディア	SDメモリーカード (2GB) SDHCメモリーカード (4GB/8GB/16GB/32GB)			
	フォーマット	FAT16/FAT32			
	メディア内最大検査数	9999			
	検査内最大ファイル数	5000			
画質	画像非圧縮形式	TIFF			
	画像圧縮方式	JPEG			
動画	記録時間	※ 2GB SDカード使用時			
静止画	記録枚数	※ 動画・静止画が混在した場合は、SD内に記録できる時間・枚数とも異なります。			
	画 質	EQ (大容量)	SQ (標準画質)	HQ (高画質)	TIFF (非圧縮)
	動画 記録時間	約600秒	約500秒	約400秒	一(撮影不可)
	静止画 記録枚数	約20,000枚	約10,000枚	約6,000枚	約2,000枚
	圧縮率	約1/10	約1/5	約1/3	1/1
解像度	NTSC	640×480			
映像信号	NTSC信号	29.97フレーム/秒525ライン (NTSC準拠テレビジョン信号)			
	NTSC入力	S-VIDEO/コンポジット/RGB			
	NTSC出力	S-VIDEO/コンポジット/RGB			
管理情報	ID	最大32文字			
	名前	最大32文字			
	性別	1文字			
	生年月日	12文字			
	検査時間	年月日時分秒			
電源		AC100V~230V 50/60Hz(100VAC 0.62A)			
外形寸法	本体	約202W×94H×282D(mm)			
	リモコン	約77W×18H×190D(mm)			
質量	本体	約3.2Kg			
	リモコン	約200g			
通信制御		RS-232C			
		LAN (1000BASE-T/100BASE-TX)			
接点入力		ステレオミニジャック(外部トリガ用)			
安全規格		電機用品安全基準拠			

### 外形寸法図

単位 : mm

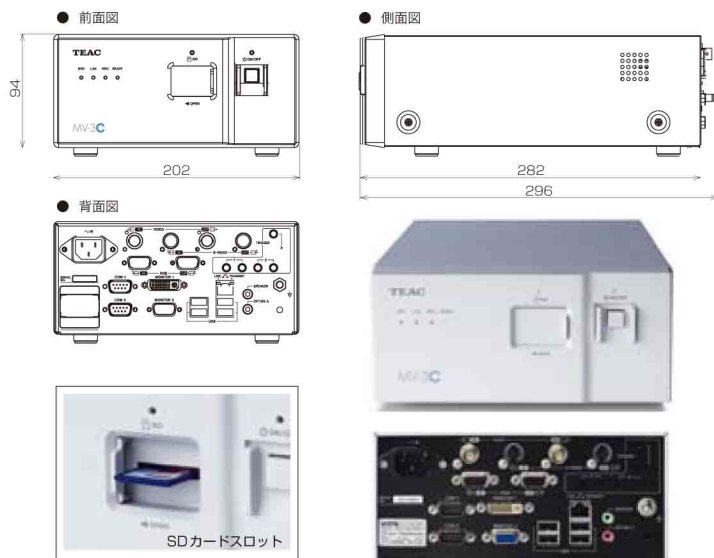

### 付属品

リモートコントロールユニット (VS-3C) 1台  
RGBケーブル(D-sub・D-sub) 1式  
SDカード 1枚  
電源ケーブル 1本  
ケーブルランプ 1個  
取扱説明書 1冊

### アクセサリ

フットスイッチ  
USB インタフェース 磁気カードリーダー  
USB インタフェース バーコードリーダー

※ 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※ 記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社

<http://teacmv.jp/>

### MV営業課

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

TEL 042-356-9160 FAX 042-356-9185



株式会社 浅沼商会

産業機材事業部

〒279-0012 千葉県浦安市入船 1-5-2 TEL047-304-3240

NBF新浦安タワー5階 TEL047-304-3241

〒550-0015 大阪市西区南堀江 1-18-4 TEL06-6538-3114

住友生命澁町MTビル5階 TEL06-6538-3115

<http://www.asanumashoukai.co.jp/sanki/>